


ガドテドール静注シリンジ13mL/17mL〔HK〕 のご使用方法

1 フィルム包装を開封し、 シリンジを取り出してください。

- フィルム包装開封前に破れ等があった場合は使用しないでください。
- シリンジに破損等の異常が認められるときは使用しないでください。
- 内容液が漏れている場合や、内容液に混濁や浮遊物等の異常が認められるときは使用しないでください。
- プランジャーがしっかり装着されているかをご確認ください。

2 トップキャップを回しながら 引き抜いてください。

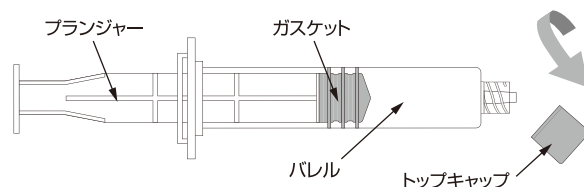

- 液漏れにご注意ください。注入口付近が濡れるとルアーロック非対応の翼状針との装着が緩くなります。
- トップキャップは、注射針(翼状針)等をセットする直前まで取り外さないでください。

3 トップキャップを外したら 速やかに注射針(翼状針)等を セットしてください。

- ルアーロック非対応の翼状針を使用する場合、奥までしっかりと装着してください。
- ルアーロック式器具を使用する場合、少し抵抗を感じた時点で締め込みを止めてください。締め込み過ぎはルアーロックの破損につながるおそれがありますので、ご注意ください。

4 投与前にはエア抜きを 実施してください。

5 シリンジ本体をしっかり保持して プランジャーをまっすぐに押して 注入してください。(用手による 注入の場合)

- シリンジのラベルには、投与量換算体重を表記していますので、注入のご参考としてください。

ご使用時のお願い

- 電子レンジ及び湿式・温水中での加温はしないでください。
- 開封後の使用は一回限りとし、使用後の残液は速やかに廃棄してください。



光製薬株式会社